



Always in All ways

پانسمان های نوین دیالیز



امودیاال

شرکت امودیاال یکی از معتبرترین شرکتهای ایتالیایی در زمینه تولید انواع پانسمان های پزشکی و برای اولین بار پانسمان های حاوی نقره مختص بیماران دیالیزی است. امودیاال در سال ۱۹۸۲ در شهر فرارا با هدف حفاظت از بیماران دیالیزی در برابر انواع عفونت های ناشی از دسترسی های عروقی مختلف تاسیس شد.



مدوی طب پویان

شرکت مدوی نماینده رسمی و انحصاری فروش و خدمات پس از فروش تولیدکنندگان عضو کنسرسیوم دیالیز ایران است. مدوی در سال ۱۳۹۲ تأسیس شد و مأموریت این شرکت مدیریت زنجیره تأمین کالا در حوزه محصولات دیالیز در بستر سازمانی یادگیرنده و هوشمند است.

هزینه های ناشی از درمان انواع عفونت در محیط های بیمارستانی به اندازه ای بالاست که بخش اعظمی از بودجه حوزه سلامت را به خود اختصاص می دهد. در بیماران دیالیزی به دلیل دسترسی مستقیم عروقی در طولانی مدت، ضعف سیستم ایمنی، نیاز به بستری شدن مکرر، وجود تجهیزات و وسایل زیاد و تماس شخص با شخص و تجهیزات ریسک ابتلا به عفونت بسیار بالاست و کیفیت زندگی و میزان زنده ماندن این بیماران به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد. در بین فلزات طبیعی، یونهای نقره خواص ضد میکروبی بسیار قوی در برابر انواع گونه های باکتریایی، قارچی و ویروسی دارند و به همین دلیل نقره از دیرباز بسیار مورد توجه بوده است.

از این رو شرکت مدوی در نظر دارد تا در راستای تکمیل سبد کامل درمانی و استانداردسازی خدمات دیالیز و ارائه راهکارهای کنترل عفونت با تأمین محصولات و تجهیزات حاوی نقره به مدیریت بهتر و آسانتر بخشهای دیالیز و کنترل عفونت کمک کند.




چرا نقره ؟

یون های نقره با غلظت کم، با مکانیزم های زیر فعالیت باکتری ها را به سرعت مهار می کنند:

۱. تغییر دیواره سلولی و ایجاد شوک اسموتیک در آن
۲. تخریب سیستم تنفسی از طریق تداخل با چرخه آنزیم ها
۳. باند شدن با DNA و ایجاد آپتوزیس

از دلایل اهمیت استفاده از نقره در پانسمان های مدرن :

- از بین رفتن طیف گسترده ای از میکروارگانیسم ها شامل ۶۵۰ نوع از باکتری ها از جمله باکتری های مقاوم به دارو، قارچ و ویروس
- کوتاه کردن مدت فرایند ترمیم زخم به علت افزایش واسکولاریزاسیون و کاهش فعالیت متالوپروتئازها و افزایش آپوپتوز نوتروفیل ها
- جلوگیری از تشکیل اسکار در محل دسترسی های عروقی
- تحریک رژنراسیون در پوست و کمک به رشد بافت گرانوله
- کاهش التهاب و خارش در محل ورود دسترسی عروقی به دلیل کاهش آزاد شدن مدیاتورهای التهابی مانند اینترلوکین و پیشسازهای التهابی مانند سیتوکین ها

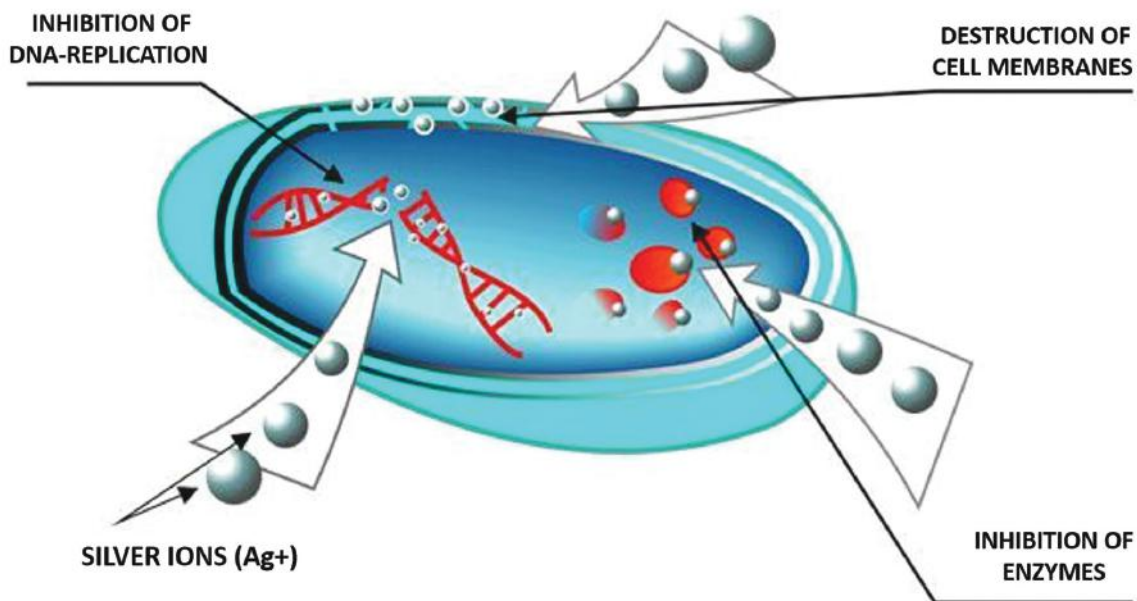

مراحل ترمیم عفونت محل کتتر توسط پانسمان‌های نقره دار امودیال :



- عفونت EXIT SITE کتتر عفونی، آلوده به باکتری



- استفاده از EXIT PAD AG



- ۲ روز بعد از استفاده از EXIT PAD AG



- ۲ هفته بعد از شروع درمان



- شروع هفته سوم





نام فارسی	نام انگلیسی	دسته بندی محصولات
پانسمان نقره دار فیستول	NOVA SOVAN AG	پانسمان های نقره دار فیستول
بانداز نقره دار فیستول	NOVA BETAFIX AG	
پد نقره دار کتتر	EXIT PAD AG	پانسمان های نقره دار کتتر
پانسمان نقره دار کتتر	EXIT PRO AG	
پانسمان نقره دار کتتر با کیسه محافظ	EXIT POCKET AG	

از جمله مهم ترین ویژگی های محصولات امودیتال :

- وجود نقره در پانسمان ها
- بدون ایجاد مقاومت میکروبی
- تنوع محصول بر اساس نوع دسترسی عروقی
- استفاده آسان
- برای اولین بار مختص بیماران دیالیزی
- افزایش کیفیت زندگی بیماران دیالیزی
- تضمین ایمنی دسترسی های عروقی
- افزایش طول عمر دسترسی های عروقی



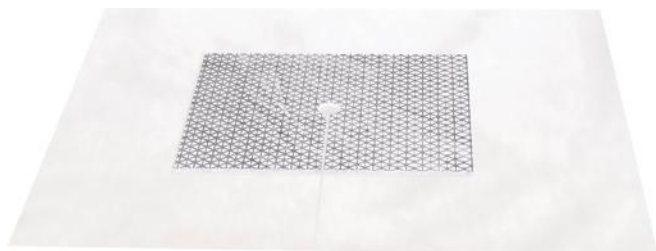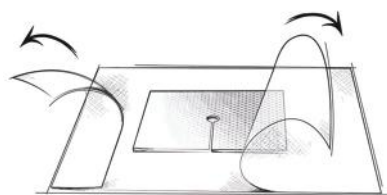

پانسمان نقره دار کاتتر

تعداد در هر کارتن	تعداد در هر بسته	ابعاد پانسمان (cm)	ابعاد پد نقره دار (cm)	مدل	کد محصول
100	1	10 x 8	5 x 4	Cut and Hole Ø 5 mm	4815441

قطر دایره Ø

توصیف محصول


- پانسمان نقره دار کاتتر و دارای چسب با قابلیت تنفس پوستی و هیپوآلرژیک

موارد کاربرد



- مخصوص پانسمان exit site
- برای کاهش و جذب ترشحات اگزوداتیو exit site

موارد احتیاط استفاده از انواع پانسمان های نقره دار :

- عدم استفاده از این پانسمان در بیماران حساس به نقره
- عدم استفاده از محلول های ضد عفونی کننده یددار همراه با پانسمان های نقره دار
- عدم استفاده از پانسمان های نقره دار در طول روش های تشخیصی مانند X-Ray، اولتراسونوگرافی، دیاترمی و MRI
- عدم استفاده از پانسمان های نقره دار برای درمان عفونت های سیستمیک

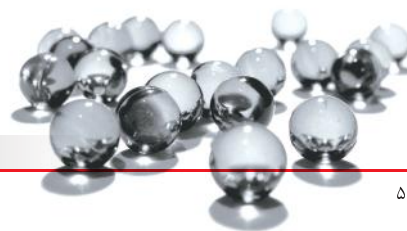

پد نقره دار کنتر

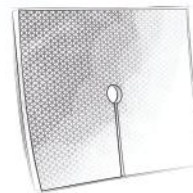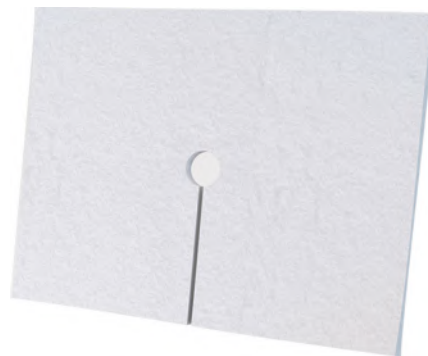

تعداد در هر کارتن	تعداد در هر بسته	ابعاد (cm)	مدل	کد محصول
100	1	3.5 x 4.5	Cut and Hole Ø 5 mm	4815410

قطر دایره Ø

توصیف محصول

- پد نقره دار کنتر بدون چسب

موارد کاربرد

- مخصوص پانسمان exit site
- برای کاهش و جذب آگزودا در محل exit site





پانسمان نقره دار کنتر با کیسه محافظ

تعداد در هر کارتن	تعداد در هر بسته	ابعاد کیسه محافظ (cm)	ابعاد پد نقره دار (cm)	کد محصول
50	1	8 x 17	5 x 4	4815435

توصیف محصول


- پانسمان چسب دار با پد نقره و دارای کیسه محافظ کنتر

موارد کاربرد

- مخصوص پانسمان exit site
- برای کاهش و جذب ترشحات اگزوداتیو exit site
- جلوگیری از تحریک مکانیکی پوست توسط برخورد مداوم کنتر با پوست
- امکان چند بار باز و بسته کردن کیسه برای بررسی لومن کنتر



پانسمان نقره دار فیستول

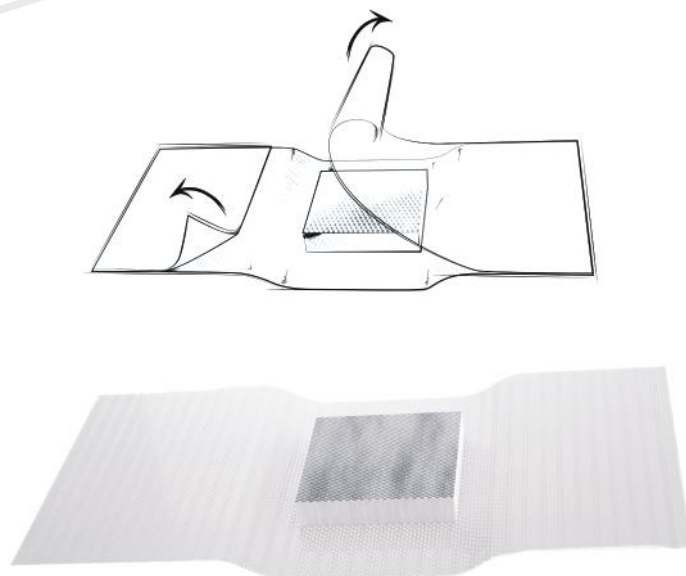

تعداد در هر کارتن	تعداد در هر بسته	ابعاد پانسمان (cm)	ابعاد پد نقره دار (cm)	مدل	کد محصول
30	2	10 x 5	2.5 x 2.5	non-woven	4815479
100	1	10 x 5	2.5 x 2.5	دارای بافت پلی اورتان ضد آب	4815475

توصیف محصول

شامل یک پد هیدروکلوئیدی نقره دار بر روی بافت چسبنده با خاصیت تنفسی و هیپوآلرژیک

مدل ها:

مدل A: non-woven (بدون بافت)

مدل B: دارای بافت پلی اورتان ضد آب

موارد کاربرد:

دارای فعالیت هموستاتیک فشاری به ویژه برای مراقبت از فیستول بعد از خارج کردن سوزن در پایان دیالیز درمان و پروفیلاکسی از عفونت محل فیستول و کمتر بعد از خارج کردن آنها





بانداز نقره دار فیستول

تعداد در هر بسته	تعداد در هر بسته	عرض بانداز (cm)	طول بانداز (cm)	ابعاد پد نقره دار (cm)	کد محصول
50	2	6	45 + 10 %	2.5 x 2.5	4815473

توصیف محصول

- بانداز الاستیک فشاری برای محل فیستول، دارای پد نقره دار و چسب در انتهای بانداز برای فیکس شدن

موارد کاربرد:

- مراقبت از محل فیستول بعد از خارج کردن سوزن در پایان دیالیز
- مراقبت از محل پانکچر وریدی و یا محل ترانسفوزیون خون بعد از خارج کردن سوزن







Always in All ways

نشانی دفتر مرکزی:

ایران، تهران، سعادت آباد، نبش کوچه میرزایی (پانزدهم)، پلاک ۴۴، طبقه ۱، کد پستی: ۱۹۹۸۸۳۶۷۸۵

داخلی ۱۱۱۰ تا ۱۱۱۶

+۹۸ - ۲۱ - ۲۲۰۷۴۰۰۱

فروش:

۰۹۱۲ - ۰۳۴۰۸۶۴

بازاریابی:

+۹۸ - ۲۱ - ۲۲۳۶۱۰۶۷

نماینده:

۰۹۱۲ - ۹۵۹۳۸۴۹

نماینده علمی:



www.Medwayteb.com



Sales@Medwayteb.com



[Medwayteb](https://www.instagram.com/Medwayteb)



[@Medway](https://www.telegram.me/Medway)